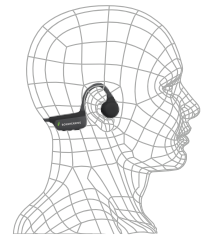

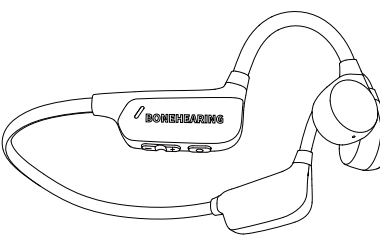
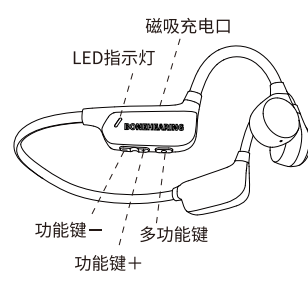





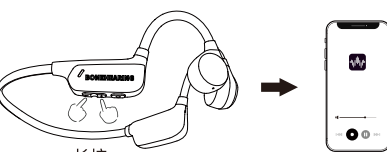
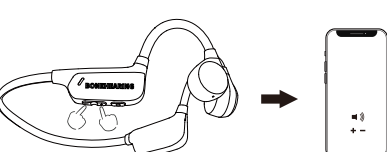

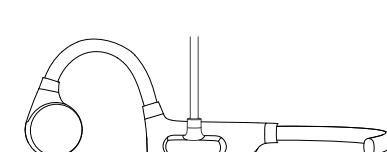
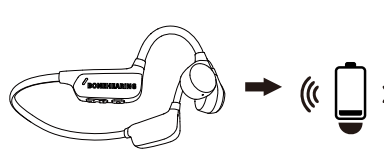
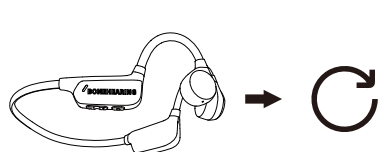
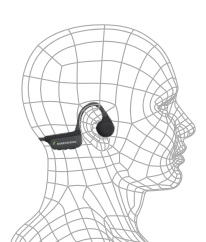
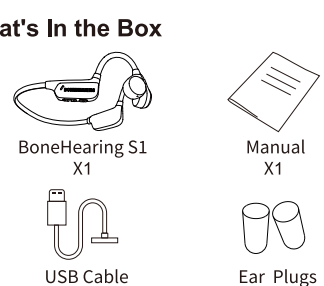
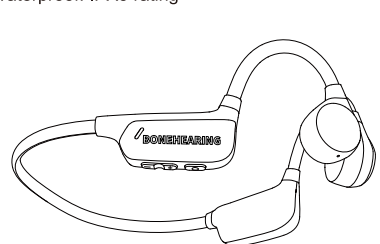
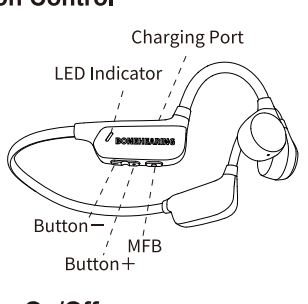
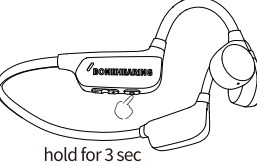
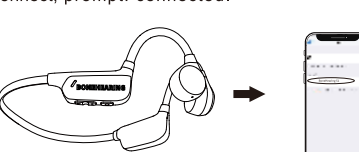
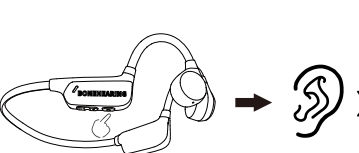





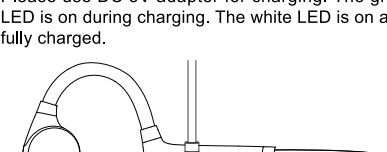
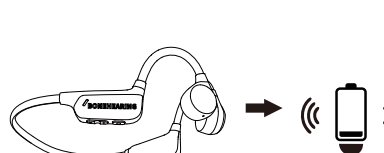
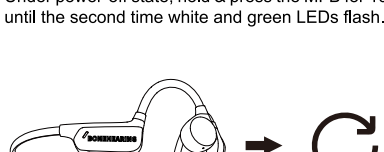


<p>骨传导辅听器 BoneHearing S1</p> <p>使用说明书</p>	<p>佩戴方式</p>  <p>配件清单</p> 	<p>产品信息</p> <p>产品型号: BoneHearing S1 耳机类型: 骨传导辅听器 BT版本: 5.3 连接范围: ≈15米 电池容量: 180mAh 蓝牙模式: ≈10小时(80%音量) 播音模式: ≈6小时(80%音量) 充电时间: ≈2小时 充电电压: DC 5V 防水等级: IPX5生活防水</p> 	<p>按键示意图</p>  <p>开/关机</p> <p>开机: 长按多功能键3秒, LED白灯闪烁, 提示音: power on/开机完成 关机: 长按多功能键3秒, LED绿灯闪烁, 提示音: power off</p> 	<p>蓝牙连接</p> <p>开机自动进入蓝牙模式, 打开手机蓝牙, 选择“BoneHearing S1”进行连接, 提示音: connected.</p>  <p>拾音模式</p> <p>双击多功能键。</p> 
<p>接听/挂断/拒接来电</p> <p>接听/挂断电话: 单击多功能键。 拒接来电: 双击多功能键。</p>  <p>播放/暂停音乐</p> <p>单击多功能键。</p> 	<p>上/下一曲</p> <p>上一曲: 长按+键。 下一曲: 长按-键。</p>  <p>音量加/减</p> <p>音量加: 单击+键。 音量减: 单击-键。</p> 	<p>唤醒语音助手</p> <p>快速三击多功能键。</p>  <p>充电</p> <p>请使用DC 5V适配器为耳机充电, 充电时绿灯常亮, 充满电白灯常亮。</p> 	<p>低电量提示</p> <p>当耳机电池电量低于10%时, 每隔30秒绿灯闪烁3下, 提示音: battery low.</p>  <p>恢复出厂设置</p> <p>关机状态下, 长按多功能键10秒直至第二次白灯闪烁。</p> 	<p>重要说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 长时间听大音量音乐可能会导致不适感, 请尽可能使用中等左右的音量, 避免长时间使用大音量; 无论音量大小, 使用耳机都将影响您对周围环境的感知, 使用耳机时多加注意; 切勿拆除或改装耳机, 否则可能导致耳机故障或损坏; 切勿拆卸、挤压耳机或将耳机投入火中; 耳机应远离火、高电压设备; 不适合十岁以下儿童使用, 内含微小零件; 请勿将其归类为生活垃圾, 而将其送往当地相应的电器设备回收站。 <p>注意: 若用户因违反以上警告内容造成的人身财产损失, 本公司不承担任何责任。</p>

<p>Bone Conduction Sound Amplifier Headphones BoneHearing S1</p> <p>User Manual</p>	<p>How to Wear</p>  <p>What's in the Box</p> 	<p>Specifications</p> <p>Model: BoneHearing S1 Type: Bone conduction sound amplifier headphones BT Version: 5.3 Connection: ≈15m Battery: 180mAh BT Mode: ≈10h(80%volume) Amplifier Mode: ≈6h(80%volume) Charging Time: ≈2h Charging Voltage: DC 5V Waterproof: IPX5 rating</p> 	<p>Button Control</p>  <p>Power On/Off</p> <p>Power On: press & hold the MFB for 3 sec, prompt: power on/pairing Power Off: press & hold the MFB for 3 sec, prompt: power off.</p> 	<p>BT Connection</p> <p>The headset enters BT mode automatically when power-on. Select "BoneHearing S1" in BT menu to connect, prompt: connected.</p>  <p>Sound Amplifier Mode</p> <p>Double click the MFB.</p> 
<p>Answer/Hang Up/Reject A Call</p> <p>Answer/Hang Up: Click the MFB once. Reject: Double click the MFB.</p>  <p>Play/Pause Music</p> <p>Click once the MFB.</p> 	<p>Previous/Next Track</p> <p>Previous Track: Press & hold the button +. Next Track: Press & hold the button -.</p>  <p>Volume Up/Down</p> <p>Volume Up: Click the button + once. Volume Down: Click the button - once.</p> 	<p>Activate Voice Command</p> <p>Quick triple click the MFB.</p>  <p>Charge</p> <p>Please use DC 5V adapter for charging. The green LED is on during charging. The white LED is on after fully charged.</p> 	<p>Low Battery</p> <p>When battery is lower than 10%, prompt: battery low.</p>  <p>Restore Factory Setting</p> <p>Under power-off state, hold & press the MFB for 10 sec until the second time white and green LEDs flash.</p> 	<p>Attentions</p> <ol style="list-style-type: none"> Listening to loud music for a long time may cause discomfort, please use medium volume if possible. Don't use high volume for long periods of time. Using headphones will affect your perception of the surrounding environment. Pay more attention when using headphones. Do not remove or modify the headphone as this may cause damage or burn out. Do not throw, test on headphones or put them into a fire. Keep it away from fire, hydration and high pressure equipment. Not suitable for children under 10-year-old containing small parts. Do not classify it as household waste. Please send it to the local electrical equipment recycling station. <p>Note: The company does not assume any responsibility for the loss of personal property caused by the violation of the above warnings.</p>